

# Provtagning för rättsgenetisk faderskapsundersökning vid verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården


- Provet tas av en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som kontrollerar provgivarens identitet och fyller i uppgifterna om provtagningen i handlingen **Handling över provtagning för rättsgenetisk faderskapsundersökning**. Hon/han också fyller i handlingen **Intyg över provtagning för rättsgenetisk faderskapsundersökning på förordnande av domstolen**.
- Provgivaren ska undvika att äta, dricka (utom vatten) och röka minst en halv timme före provtagningen.

**1** Ta två prover per person. Skriv provgivarens namn och personbeteckning tydligt med en kulspetspenna eller permanent tusch på två etiketter. Färgen på etiketternas kanter är blå för mannen, röda för modern och gula för barnet.

**2** Öppna två folieförpackningar och klistra etiketterna på provrörens vita korkar.



**3** Öppna ett provrör genom att dra i den vita korken (korken sitter hårt). Se till att provborsten inte rör vid något. Använd handskar.

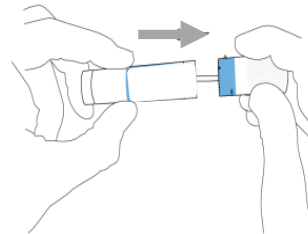

**4** Gnugga eller snurra provborsten stadigt mot insidan av provgivarens kind i cirka 10 sekunder och slut provborsten i sitt rör genast efter provtagningen. Se till att du inte trycker provborsten så hårt att skaftet går av (en sådan situation är mycket osannolik).

**5** Upprepa punkt 3 och 4 med den andra provborsten mot den andra kinden.

**6 OBS!** *Provrören och Handlingen över provtagningen förpackas i ett svarskuvert.*

*Intyg över provtagning ges till provgivaren.*



# Fakturering av provtagning

**Ersättning för provtagningskostnader för prov som tagits för en rättsgenetisk faderskapsundersökning vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård.**

**Om undersökningen har förordnats av domstol eller beställts av barnatillsyningsmannen**, ersätts 10 €/person för provtagningen enligt 8 § i förordning 805/2022. Eftersom proverna skickas till Institutet för hälsa och välfärd i en påse med svarsförsändelsekod uppstår inga försändelsekostnader.

**Institutet för hälsa och välfärds nätfaktureringsadress är:**

EDI-kod 003722295006

THL:s förmedlarkod för nätfakturer (Posti Messaging Oy): FI28768767

FO-nummer 2229500-6

**Fakturans mottagare är:**

Institutet för hälsa och välfärd

Rättsgenetik/5610040403

PB 5660

01051 LASKUT

**Fakturans uppgifter:**

Som referens/meddelande i fakturan anges "Prov för faderskapsundersökning" samt domstolens "diarienummer"/ barnatillsyningsmannens "ärendenummer" från provtagningshandlingen.

Provgivarens namn och personbeteckning antecknas inte på fakturan.

**Mer information:**

Ledande expert Marjo Avela, [marjo.avela@thl.fi](mailto:marjo.avela@thl.fi), 029 524 8723

\*\*\*\*\*

**Om undersökningen begärs av en privatperson** ansvarar privatpersonen för att kostnaderna för provtagningen ersätts direkt till verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvården.

# Oikeusgeneettisen isyystutkimuksen näytteenotto terveydenhuollon toimintayksikössä


- Tutkittava tuo posken sisäpinnan sivelynäytteiden ottamista varten mukanaan suljetun näytteenottopaketin sekä **oikeusgeneettisen isyystutkimuksen näytteenottoasiakirjan**. Jos tutkimus on tuomioistuimen määräämä, henkilö tuo mukanaan myös **todistuksen näytteenotosta**.
- **Näytteet ottaa laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka tarkistaa tutkittavan henkilöllisyyden ja täyttää huolella edellä mainitut asiakirjat.**
- Näytteenantajan tulee välttää syömistä, juomista (paitsi vesi) ja tupakointia vähintään puoli tuntia ennen näytteenottoa.
- Näytteenottoa koskevia lisätietoja voi kysyä numerosta 029 524 8900.

**1** Näytteitä otetaan kaksi kappaletta per henkilö. Tutkittavan nimi ja henkilötunnus kirjoitetaan selkeästi kuulakärkikynällä tai permanenttitussilla kahteen tarraan. Miehellä on sinireunaiset, äidillä punareunaiset ja lapsella keltareunaiset tarrat.

**2** Avaa kaksi foliopakkausta ja kiinnitä nimitarrat putkien valkoisiin korkkeihin.



**3** Avaa yksi näyteputki vetämällä valkoisesta korkista (korkki on tiukka). Varo koskemasta näyteharjalla mihinkään. Käytä hanskoja.

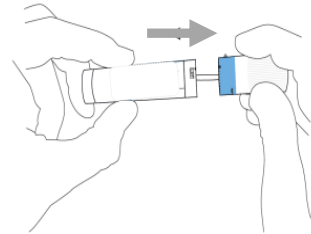

**4** Hankaa tai pyöritä näyteharjaa tutkittavan henkilön posken sisäpintaa vasten napakasti n. 10 sekunnin ajan ja sulje näyteharja putkeensa välittömästi näytteenoton jälkeen. Ole huolellinen, että et paina näyteharjalla niin lujaa, että sen varsi katkeaa (tällainen tilanne on hyvin epätodennäköinen).

**5** Toista kohdat 3 ja 4 toisella näyteharjalla toisesta poskesta.

**6 HUOM!** *Näyteputket ja näytteenottoasiakirja suljetaan keltamustaraidalliseen palautuskuoreen ja postitetaan terveydenhuollon toimintayksiköstä THL:lle.*

**Todistus näytteenotosta annetaan näytteenantajalle.**



# Näytteenoton laskutus

**Terveydenhuollon toimintayksikössä otetun oikeusgeneettisen isyytutkimuksen näytteen näytteenottokustannusten korvaaminen.**

**Jos tutkimus on tuomioistuimen määräämä tai lastenvalvojan tilaama**, näytteenotosta korvataan asetuksen 805/2022 8 §:n mukaisesti 10 €/henkilö. Koska näytteet lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle vastauslähetystunnuksellisessa pussissa, lähetyskuluja ei aiheudu.

**Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkolaskuosoite on:**

OVT-tunnus 003722295006

THL:n verkkolaskun välittäjä-tunnus (Posti Messaging Oy): FI28768767

Y-tunnus 2229500-6

**Laskun vastaanottaja on:**

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Oikeusgenetiikka/5610040403

PL 5660

01051 LASKUT

**Laskun tiedot:**

Laskuun laitetaan viitteeksi/viestiksi ”Isyytutkimusnäyte” sekä tuomioistuimen ”diarinumero”/lastenvalvojan ”asianumero” näytteenottoasiakirjasta.

Laskuun ei merkitä näytteenantajan nimeä ja henkilötunnusta.

**Lisätietoja:**

Johtava asiantuntija Marjo Avela, [marjo.avela\(at\)thl.fi](mailto:marjo.avela@thl.fi), 029 524 8723

\*\*\*\*\*

**Jos tutkimus on yksityishenkilön pyytämä**, yksityishenkilö vastaa näytteenottokustannusten korvaamisesta suoraan terveydenhuollon toimintayksikölle.